

GANZHEITLICHER KONZEPTANBIETER

FÜR DIE OBERE UND UNTERE EXTREMITÄT



SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS

bieten ein ganzheitliches und innovatives Produktportfolio für die motorische Rehabilitation der oberen und unteren Extremität. Diese Produkte können in jedes gängige Therapiekonzept eingebunden werden – und lassen dabei dem Therapeuten Spielraum für eigene Ideen.


Dynamik statt Schienenstarre – nach diesem Prinzip schützen sie gefährdete Strukturen und gleichen fehlende Funktionen aus.

SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS

optimieren die Rückführung der Patienten in den Alltag – und in die Beweglichkeit.



FOOTCARE

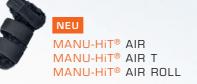











NEURO-KOMPETENZ

IM ORTHOPÄDIE- UND SANITÄTSFACHHANDEL

SPORLASTIC NEURO-Kompetenzpartner

zeigen im Orthopädie- und Sanitätsfachhandel Kompetenz in einem Versorgungsfeld von wachsender Bedeutung. Sie bieten Ihren Kunden ein besonderes Leistungsprofil von hohem Nutzen an und sind somit eine wichtige Beratungsstelle bei neurologischen Erkrankungen.







SPORLASTIC GANZHEITLICHES BEHANDLUNGSKONZEPT

RUNDUM VERSORGT

Zu neurologischen Erkrankungen zählen unter anderem Beeinträchtigungen des Gehirns und des Rückenmarks, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Parkinson oder Schlaganfall. Bei diesen Krankheitsbildern kann es zu Lähmungen der Muskulatur kommen.

Ein frühzeitiger, interdisziplinärer Therapiebeginn kann dazu beitragen, verlorengegangene Funktionen bestmöglich zu rehabilitieren. Die Versorgung mit funktionellen Hilfsmitteln, wie Bandagen und Orthesen, ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Für die motorische Rehabilitation gilt grundsätzlich, dass sich schmerzhafte Strukturen und Bewegungen schlecht trainieren lassen. Daher ist es wichtig, die Gelenke so lange zu schützen und funktionell zu unterstützen, bis die Muskulatur diese Funktionen wieder eigenständig übernehmen kann.

SPORLASTIC bietet ein ganzheitliches NEURO Produktportfolio, um die unterschiedlichen Ausprägungsgrade einer Lähmungserscheinung therapeutisch bestmöglich zu unterstützen.





MOTIVATION UND EIGENTHERAPIE IM ZUSAMMENSPIEL

SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS stehen für ein ganzheitliches und innovatives Produktportfolio funktioneller Bandagen und Orthesen. Sie dienen gezielt der motorischen Rehabilitation. In Kombination mit medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen unterstützen diese ganzheitliche Behandlungskonzepte, die einen nachhaltigen Therapieerfolg begünstigen.

Bieten Sie Ihren Patienten einen echten Zusatznutzen:

Unsere Patienteninformationsbroschüre zum Thema Neurologische Erkrankungen wurde speziell für Patienten mit entsprechenden Bewegungseinschränkungen und Verletzungen erstellt. Dabei erfahren Ihre Patienten wissenswerte Hintergrundinformationen zu den häufigsten Krankheitsbildern und möglichen therapeutischen Ansätzen der Versorgung.







NEU MOBILISIERUNG VON HAND UND FINGERN

MANU-HIT® AIR, MANU-HIT® AIR T, MANU-HIT® AIR ROLL

Handgelenkorthesen mit integriertem Luftkammersystem zur Mobiliserung von Hand, Handgelenk, Fingern und Daumen

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- Posttraumatisch
- · Chronische PCP
- · Bei schlaffen und spastischen Lähmungen von Hand und Fingern

KASSENÜBLICH

Angemeldet unter Positions-Nr. 23.07.03.1xxx MANU-HIT® AIR

Artikel-Nr. 07355

MANU-HIT® AIR T

Artikel-Nr. 07356

MANU-HiT® AIR ROLL

Artikel-Nr. 07357

WIRKUNG

MANU-HIT® AIR

- · Zur Vermeidung von Fehlstellungen des Handgelenks und der Finger
- · Zur Vermeidung von Hand- und Fingerbeugekontrakturen bei neurologischen Erkrankungen

MANU-HIT® AIR T

- · Zur Vermeidung von Fehlstellungen des Handgelenks, der Finger und des Daumens
- · Zur Vermeidung von Hand-, Fingerund Daumenbeugekontrakturen bei neurologischen Erkrankungen

MANU-HIT® AIR ROLL

- · Zur Vermeidung von Fehlstellungen der Finger
- · Zur Vermeidung von Hand- und Fingerbeugekontrakturen bei neurologischen Erkrankungen

GRÖSSE IN CM

MANU-HIT® AIR UND AIR T

Handbreite über den Fingergrundgelenken

1	8	-	12	
2	10	-	13	

- Farbe:
- · Bitte R oder L angeben

MANU-HIT® AIR ROLL

- · Nur eine Größe
- Farbe:
- · Bitte R oder L angeben

MÜHELOS ANZIEHEN - SICHERER GEHEN

SPORLASTIC FOOTCARE

Orthesenschuhe mit rückseitigem Einstieg und einhändig bedienbarem Verschluss-System

INDIKATIONEN

- · Konservativ/postoperativ
- · Bei Verwendung einer Unterschenkel-Fuß-Orthese
- Bei Fußheberschwäche
- · Bei eingeschränkter Mobilität
- Nach Schlaganfall
- · Sonstige neurologische Erkrankungen
- · Optimale Verwendung auch bei Maßorthesen

WIRKUNG

- · Leichtes An- und Ausziehen sowie Anpassen durch BOA-Verschluss-System
- Sehr weite Öffnung des Gesamtschuhs
- · Gewölbte Sohlenform für seitliche Stabilität
- · Angehobene Fußspitze vermindert Gefahr des Hängenbleibens
- · Optimierte Ballenrolle für rasches Einleiten der Abrollphase
- · Glatter Sohlenrand für besseres Gleitverhalten
- · Abgerundeter Absatz für kontrollierten Fersenauftritt
- · Auftrittsdämpfung durch Material und Formgebung der Sohle

SCHUHGRÖSSE

Modell ELIO für Herren 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45 • Farbe:

39, 40, 41 • Farbe:

Modell GEA für Damen

35, 36, 37, 38,

KASSENÜBLICH

Modell ELIO für Herren Positions-Nr. 31.03.03.7029

Artikel-Nr. 07858

Modell GEA für Damen Positions-Nr. 31.03.03.7029

Artikel-Nr. 07856



MANU-HIT® AIR T

Handgelenkorthese mit integriertem Luftkammer-

MANU-HIT® AIR ROLL

Handgelenkorthese mit integriertem Luftkammersystem zur Mobiliserung von Hand und Fingern



system zur Mobiliserung von Handgelenk, Fingern und Daumen



Regulierbare Luftkammer durch Luftpumpe zur dynamischen Lagerung der Finger

> Teildynamische und anformbare volare Verstärkungsschiene mit Aluminiumkern für optimale Lagerung

MANU-HIT® AIR

Atmungsaktives Polster für hohen Tragekomfort

TECHNIK



BOA-Verschluss-System

- Zum Öffnen einfach ziehen

2. Durch Drehen wird der Schuh geschlossen und individuell reguliert

Speziell gewölbte Sohlenform für mehr Stabilität und Sicherheit beim Gehen



Optimierte Abrollkante für rasches Einleiten der Abrollphase





GELENKSICHERUNG MIT BEWEGUNGSERFIHEIT

NEURO-LUX® II

Funktionsorthese zur Sicherung des Schultergelenks bei schlaffen Lähmungen

INDIKATIONEN

- Konservativ
- · Schulter-Hand-Syndrom
- Subluxation
- · Schlaffe und schmerzhafte Bewegungseinschränkungen der Schulter- und Armmuskulatur nach:
- · Hemiplegie
- Plexusverletzungen
- · Schädel-Hirn-Trauma
- · Traumen der Halswirbelsäule
- · Peripheren Nervenschädigungen

KASSENÜBLICH

Positions-Nr. 23.09.03.0003

Artikel-Nr. 07261

WIRKUNG

- · Reposition des Humeruskopfes im Schultergelenk mit Korrektur von Subluxation und Innenrotation
- · Sicherung des Schultergelenks bei freier Armfunktion
- · Schmerzlinderung
- · Vermeidung von Sekundärschäden an Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- · Verbessertes Gangbild durch geführte Armpendelbewegung
- · Deutliche Korrektur der pathologischen Innenrotation durch Einfassung des Ellenbogens und entsprechend außenrotatorisch wirkender schräg verlaufender Zügelführung

GRÖSSE IN CM

	Armte	il			Schult	erteil
	Größte	er Umfar	ıg U	nterarm	Brustu	mfang
1	S	bis		25	S	bis 90
2	S	bis		25	M	90 - 105
3	S	bis		25	L	105 - 125
4	M	25	-	29	S	bis - 90
5	M	25	-	29	M	90 - 105
6	M	25	-	29	L	105 - 125
7	L	29	-	35	S	bis - 90
8	L	29	-	35	M	90 - 105
9	L	29	-	35	L	105 - 125

- Farbe:
- Bitte R oder L angeben

STARKE FÜHRUNG, LEICHTES ANLEGEN NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE UND FLEX

Dynamische Fußheberorthesen mit innovativem Magnetverschluss

INDIKATIONEN

NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE

- · Konservativ/postoperativ
- Schlaffe und (mittelschwere) spastische Fußheberparesen z.B. nach Schlaganfall, bei Multipler Sklerose, Peroneusparese, sonstigen neurologischen/muskulären Erkrankungen
- · Lumbaler Wurzelschaden
- · Quadrizepsschwäche
- Vorfußamputation (partiell)

NEURODYN® DYNAM-X FLEX

- · Konservativ/postoperativ
- · Vollständige und inkomplette schlaffe Fußheberparesen
- · Lumbaler Wurzelschaden

WIRKUNG

- · Unterstützung der Fußhebung
- Fuß wird in 90° Dorsal-Extension gehalten
- Vorgezogene Ballenrolle verlängert den Vorfußhebel
- · Harmonischer Übergang in die Zehenabstoßphase durch abgerundete Ballenrolle
- · Physiologischeres Gangbild und Abrollverhalten
- · Dynamische Unterstützung der Zehenabstoßung durch Energierückgabe der Carbonfeder
- Kniestreckende Wirkung (Modell NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE)

GRÖSSE

Schuh	größe		
S	35	-	38
M	39	-	42
L	43	-	46

- Farbe:
- · Bitte R oder L angeben

KASSENÜBLICH

NEURODYN® DYNAM-X ACTIVE Positions-Nr. 23.03.02.6015

Artikel-Nr. 07851

NEURODYN® DYNAM-X FLEX

Positions-Nr. 23.03.02.6021

Artikel-Nr. 07852

TECHNIK

Schulterteil mit ausgezeichneter Passform

Diagonale Hebezügelführung fördert Außenrotation

Brustaurt mit einfacher Handhabung beim Schließen und Öffnen

Armelement: drucklose Anlage, mit Noppenhaftband

Einhandverschlüsse mit Rutschstopp



Ohne NEURO-LUX® I



Mit NEURO-LUX® II: Über die Hebezügel kann eine angemessene Anhebung des Humeruskopfes in Richtung der Gelenkpfanne erreicht werden



TECHNIK



Komfortables Schließen der Gurte über einfach greifbaren D-Ring



Innovative Einhandbedienung durch Magnetverschluss

Geringes Eigengewicht durch Leichtbauweise

Carbonsohle mit Absatzsprengung für bessere Anpassbarkeit an den Schuh



Höhenverstellbare und thermoplastisch anformbare Frontschale

> **Optimale Klimaregulierung** durch Öffnungen in der Frontschale

> > Fußplatte schleifbar





WIEDEREINSATZ VON ARM UND HAND

NEURO-RESTRICT

Immobilisationsorthese bei CIMT-Therapie

INDIKATIONEN

- Einseitige Paresen der oberen Extremität
- · Durchführung von CIMT (Constraint-Induced-Movement-Therapy)/Forced-use/Taub'sches Training

KASSENÜBLICH

Angemeldet unter

Positions-Nr. 23.00.00.0000 Artikel-Nr. 02830

WIRKUNG

- · Verhinderung des Einsatzes des nicht betroffenen Armes durch dessen Fixation
- · Unterbindung unerwünschter kompensatorischer Bewegung
- · Stabilisierung des Rumpfes

GRÖSSE IN CM

Leibumfang 1 70 - 100 100 - 130

- Farbe:
- R und L tragbar

TECHNIK



3-teiliges Produktset



Arm- und Handfixierung mit Sicherheitsklett

Individuell anpassbar

Klettbare Arm- und Handfixierung Losreißen des gesunden Armes im Notfall möglich

Rumpfgurt stufenlos verstellbar

EINHANDVERSCHLUSS UND TRAGEKOMFORT

NEURODYN® COMFORT

Fußheberorthese mit Einhandverschluss

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- · Schlaffe und spastische Fußheberparesen z.B. nach Schlaganfall, bei Multipler Sklerose, Peroneusparese, sonstigen neurologischen/muskulären Erkrankungen

KASSENÜBLICH

Angemeldet unter Positions-Nr. 23.00.00.0000 Artikel-Nr. 07830

WIRKUNG

- · Unterstützung der Fußhebung
- · Reduktion der Sturzgefahr
- · Größere Schrittweite und Normalisierung des Gangbildes
- · Physiologischeres Gangbild
- · Einstellbare Wirkung auf Pro- bzw. Supination

GRÖSSE IN CM

		Fesselum	fang	Schuhgröße
1	S	bis	21	36 - 37
2	S	bis	21	38 - 39
3	S	bis	21	40 - 41
4	S	bis	21	42 - 43
5	S	bis	21	44 - 45
<u>6</u>	S	bis	21	46 - 47
7	M	21 -	24	36 - 37
8	M	21 -	24	38 - 39
9	M	21 -	24	40 - 41
10	M	21 -	24	42 - 43
11	M	21 -	24	44 - 45
12	M	21 -	24	46 - 47
13	L	über	24	36 - 37
14	L	über	24	38 - 39
15	L	über	24	40 - 41
16	L	über	24	42 - 43
17	L	über	24	44 - 45
18	L	über	24	46 - 47

- Farbe:
- · Bitte R oder L angeben

TECHNIK

Komfortable Polsterung des Knöchelbereichs für hohen Tragekomfort

Semielastische 8er-Zügelung mit starker Hebewirkung

Dynamisches Abrollverhalten, thermoplastisch anformbare flexible Einlegesohle





Einfaches Nachiustieren mit Y-Züge







SCHUTZ VOR BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

MANU-HIT® DIGITUS

Handgelenkorthese mit Fingerauflage

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- Nachtlagerungsschiene in Verbindung mit Okklusivverbänden
- · Rheumatoide Arthritis
- Akutes Karpaltunnelsyndrom
- · Mittelhand- und Fingergelenk-Distorsionen
- Nach stabilen Frakturen und Abnahme von Gipsverbänden
- Überlastungsarthropathien
- Arthrose
- · Lähmung der Hand und Finger
- · Morbus Dupuytren

WIRKUNG

- Stabilisierung von Handgelenk, Mittelhand- und Fingergelenken mit subtotaler Ruhigstellung
- Vermeidung von Handgelenk- und Fingerkontrakturen

KASSENÜBLICH

Positions-Nr. 23.07.02.1004 Artikel-Nr. 07333

GRÖSSE IN CM

Messung palmar vom Handgelenkspalt bis Mittelfingerendgelenk 1 bis 16,5 2 über 16,5

- Farbe:
- · R und L tragbar

TRAGEKOMFORT, WAHRNEHMUNG UND DYNAMIK NEURODYN® SPASTIC UND NEURODYN® CLASSIC

Textile Orthesen zur Kompensation spastischer Fußheberparesen und zur dynamischen Kompensation schlaffer Lähmungen

INDIKATIONEN

NEURODYN® SPASTIC

- Konservativ/postoperativ
- · Spastische Fußheberparesen
- NEURODYN® CLASSIC
- · Konservativ/postoperativ
- Peroneuslähmung, alle Ausprägungsgrade, besonders für leichte bis mittlere Fuß- und Zehenheberparesen (Kraftgrad 2–4)

WIRKUNG

- Unterstützung der Fußhebung und Verbesserung des Gangbildes
- Verbesserung der Fußstellung aufgrund propriozeptiver Wirkung
- Stabilisierung des Sprunggelenks und Vermeidung des Umknickens

KASSENÜBLICH

NEURODYN® SPASTIC Positions-Nr. 23.03.02.0003

Artikel-Nr. 07803

NEURODYN® CLASSIC

Positions-Nr. 23.03.02.0002

Artikel-Nr. 07077

GRÖSSE IN CM

Fessel	umfang			
1	bis		19	
2	19	-	21	
3	21	-	23	
4	23	-	25	
5	25	-	27	

NEURODYN® SPASTIC

Farbe:

NEURODYN® CLASSIC

Farben:

· Bitte R oder L angeben

TECHNIK



Volare Verstärkungsschiene



Dorsale Verschlusstechnik



Fixierung der Fingergelenke durch Klettband

Anformbare volare Verstärkungsschiene

Einfaches An- und Ablegen durch dorsale Verschlusstechnik

Einhandanlage mit Fingerschlaufe und Klettverschluss



NEURODYN® SPASTIC

Zusätzliche Vorfußkorrekturzügel
zur verbesserten Fußanhebung
und Pronationsstellung über

größere Hebelwirkung



TECHNIK

NEURODYN® CLASSIC

Einstieg mit Klettverschluss

Unelastischer lateraler Zügel

Semielastische 8er-Zügelung





THERAPIE FÜR KLINIK UND ZUHAUSE

MOBILAS® II

Innovatives Handlagerungs- und Mobilisationssystem

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- · Lagerungsbedürftige Paresen, z.B. nach Schlaganfall
- Plegien der Hand
- · Zentral bedingte Bewegungseinschränkungen und Spastiken im Arm-Handbereich

KASSENÜBLICH

Positions-Nr. 20.10.02.0002 Artikel-Nr. 02810

WIRKUNG

- Ödemreduktion
- · Kontrakturprophylaxe passiv und aktiv
- Tonusregulierung
- Verbesserte taktile Wahrnehmung
- · Frühzeitiges Eigentraining
- · Verbesserte Therapiefähigkeit
- · Für umfangreiche Therapieübungen auch zu Hause - einsetzbar

GRÖSSE

- · Nur eine Größe
- · Beidseitig verwendbar
- Farbe:

Zubehör:

- · Zubehör für passive und dynamische Lagerung
- · Zwei textile Hygieneüberzüge
- Gleitüberzug
- Übungshandbuch

EINFACH UND EFFEKTIV

FOOT-UP®

Textile Fußheberorthese zur Kompensation leichter Lähmungen

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- Fußheberparesen nach Schlaganfall oder bei sonstigen neurologischen/muskulären Erkrankungen
- · Besonders geeignet bei Kraftgrad 3 und 4
- Ermüdungsparesen

KASSENÜBLICH

Positions-Nr. 23.03.02.0004 Artikel-Nr. 07810

WIRKUNG

- · Dynamische Fußhebung
- Förderung der Aktivität der vorhandenen Fußmuskulatur

GRÖSSE IN CM

Knöch	elumfang
1	10 -

1	18	-	23	
2	23	-	30	
3	30	-	36	

- Farben:
- · R und L tragbar

Zubehör:

FOOT-UP® BARFUSS

- KEINE KASSENLEISTUNG
- Artikel-Nr. 27810

GRÖSSE IN CM

Umfang Vorfuß

1	bis		20	
2	20	-	24	
3	24	-	28	
4	über		28	

- Farben:
- · R und L tragbar

TECHNIK







3-SÄULEN-KONZEPT

- 1. Handlagerung in Funktionsstellung
- 2. Mobilisation und Eigentraining
- . Computerassistiertes motorisch-repetitives Training für Einzel-, Gruppen- und Eigen-





Der Armtracker ARYS™ me erinnert diskret daran, den Arm zu bewegen und die Smartphone-App Tree of Recovery™ visualisiert die Erfolge und Fortschritte der realistisch gesetzten Ziele

> Lagerungssystem mit anatomischer Handauflage, wischdesinfizierbar

TECHNIK

Bei allen Schnürschuhen einsetzbar

Sehr geringes Gewicht

Anatomisches, hypoallergenes Knöchelband

Transparente Einlage mit Elastikband und Steckverschluss





Einfaches Anlegen und kaum sichtbar unter der Kleidung







SPORLASTIC NEURO ORTHOPAEDICS

DYNAMIK STATT SCHIENENSTARRE

SPORLASTIC DEUTSCHLAND

SPORLASTIC GmbH

Medizinische Produkte

Weberstraße 1 • 72622 Nürtingen • Germany Postfach 14 48 • 72604 Nürtingen • Germany

Telefon +49 7022 705181 Fax +49 7022 705113 info@sporlastic.de • www.sporlastic.de

SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG

Austraße 7 • 9055 Bühler • Switzerland

Telefon +41 71 3350777 Fax +41 71 3350770 info@sporlastic.ch • www.sporlastic.ch

SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der deutschen Adresse für Sie da.



SPORLASTIC QUALITÄT



Qualitätsmanagementsystem DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016, Reg.-Nr. 069305 MP2016



SPORLASTIC DIGITAL



www.facebook.com/sporlastic





Instagram www.instagram.com/sporlastic_official

SPORLASTIC ENGAGEMENT













